



Nombre del Producto RODILLERA M.4s OA

Código MI-G02

Origen Alemania

Marca MEDI

Descripción

El perfil en 'S' mejora la estabilidad torsional respetando al mismo tiempo la alineación natural de fémur y tibia.
Las articulaciones próximas a la articulación de la rodilla permiten una precisa descarga de la rodilla. Articulaciones policéntricas.
Estructura anatómicamente premoldeada.
Fuerte construcción de estructura y articulaciones, de bajo perfil y peso ligero.
Almohadillas condilares de aire con sistema de adherencia a la piel.
Topes de extensión de: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°.
Topes de flexión de: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°.
Inmovilización en: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°.
Protección, estabilización, alivio del dolor y restablecimiento de la movilidad.
Alivio de la presión del compartimento de la articulación medial o lateral mediante el principio de 3 puntos que descarga el compartimento afectado en una posición varo/valgo.
Estabilización de la articulación de la rodilla mediante el principio de 4 puntos para contrarrestar la inestabilidad de rodilla debida a osteoartritis.
Protege contra la hiperextensión y ofrece limitación de la flexión y extensión.
Disponible también con cierre de corchetes


Indicación

Tratamiento conservador de la inestabilidad compleja de ligamento, especialmente en combinación con osteoartritis unilateral.
Tratamiento conservador de la osteoartritis unilateral avanzada.
Alivio de la presión postquirúrgica y protección compartimental tras fracturas de la cabeza tibial, cirugía de cartilago, refijación de menisco, osteotomía de corrección.
Inestabilidad de los ligamentos cruzados con alivio de la presión del compartimento medial o lateral. Para cuidado funcional pre o postquirúrgico de inestabilidades de rodilla.
*Blunding recomienda utilizar este producto bajo prescripción médica.

Como Elegir

Contorno de Muslo

X-Small	31-37 cm.
Small	37-45 cm.
Médium	45-51 cm.
Large	51-57 cm.
X-Large	57-65 cm.
XX-Large	65-74 cm.

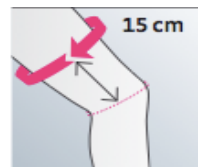

Composición

Duraluminio
Espuma PU
Poliamida

Mantenión de Producto

La órtesis se debe limpiar con un paño húmedo
Lavado a mano de almohadillas
Secar al aire y sin exposición solar

Vigencia

Guardar en un lugar seco
Blunding se compromete a sustituir la totalidad del producto por defectos de fabricación, durante un año posterior a la fecha de venta.

Garantía

El producto esta diseñado para ser usado por una persona.
Blunding ha efectuado los esfuerzos utilizando la tecnología actual para obtener la máxima funcionalidad, resistencia, durabilidad y comodidad. Sin embargo, no existe certeza absoluta de que se evitarán lesiones durante el uso de este producto.
Blunding se reserva el derecho de modificar este producto con el fin de mantener su mejora continua.
Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros

Certificación de Norma ISO-9008/2001 Sección 13485
CE E007361/08.2013
Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14